



calcium phosphate  
desensitizing gel

gel desensibilizante  
con fosfato de calcio

gel désensibilisant au  
phosphate de calcium



Den-Mat Holdings, LLC  
1017 W. Central Avenue  
Lompoc, CA 93436 USA

Symbols Glossary available at:  
[denmat.com/symbols](http://denmat.com/symbols)

Glosario de símbolos disponible en:  
[denmat.com/symbols](http://denmat.com/symbols)

Glossaire des symboles disponible à:  
[denmat.com/symbols](http://denmat.com/symbols)

©2020 Den-Mat Holdings, LLC.  
All rights reserved.  
Todos los derechos reservados.  
Tous droits réservés.  
750004000 R:1 10/20SN



## INSTRUCTIONS FOR USE

Zen CP+ desensitizing gel

## DESCRIPTION

Zen CP+ is a topical oral gel dentifrice exclusively with Calcium Magnesium Phosphate (CAPOSAL®) and Potassium Nitrate used in the protection against tooth sensitivity.

Calcium Magnesium Phosphate provides fast and complete occlusion of dentin tubules due to higher bioactivity on the dentin surface and within the tubules of the teeth. Zen CP+ also contains Potassium Nitrate which is known to increase the protection against sensitivity of the teeth by nerve depolarization.

## RECOMMENDED INDICATIONS

To be used for cleaning and polishing procedures as part of a professionally-administered prophylaxis treatment.

Secondarily, Zen CP+ can be used for the management of tooth sensitivity, after scaling and root planing, and for tooth whitening post-care.

## CONTRAINDICATIONS

None

## WARNINGS

- If pain from sensitive teeth worsens, stop using the gel and contact a medical professional
- If troublesome side effects occur, stop using the gel and contact a medical professional
- Avoid swallowing the gel


- Not intended for use by individuals under the age of 18 or women who are pregnant or breast feeding
- Keep the gel out of reach of children
- May experience minor tingling sensation of the gums after use

## DIRECTIONS FOR USE

For adults 18 years of age or older:

1. Unscrew cap and remove foil seal before use.
2. Brush teeth with standard toothpaste before use of Zen CP+.
3. Apply a dot of Zen CP+ the size of a pea (approx. 7mm) to an extra soft-bristled toothbrush or finger.
4. Apply to sensitive tooth with gentle motions and light pressure to affected areas for approximately 30 seconds.
5. Repeat process for each sensitive tooth.
6. Spit out excess gel if needed. Avoid rinsing your mouth with water.
7. Avoid eating or drinking for 45 minutes after application.
8. Use Zen CP+ once in the morning and once in the evening for 3 weeks.

(the size of a pea/approx. 7 mm):

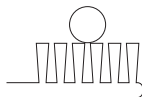

**Note:** It is recommended that the gel is not used for longer than 3 weeks.

## INSTRUCCIONES DE USO

Gel desensibilizante Zen CP+

## DESCRIPCIÓN

Zen CP+ es un dentífrico en gel tóxico bucal exclusivamente con fosfato de calcio y magnesio (CAPOSAL®) y nitrato de potasio utilizado para la protección contra la sensibilidad dental.

El fosfato de calcio y magnesio proporciona una oclusión rápida y completa de los túbulos dentinarios debido a una mayor bioactividad en la superficie de la dentina y dentro de los túbulos de los dientes. Zen CP+ también contiene nitrato de potasio, que se sabe que aumenta la protección contra la sensibilidad de los dientes por la despolarización de los nervios.

## INDICACIONES RECOMENDADAS

Para utilizar en procedimientos de limpieza y pulido como parte de un tratamiento profiláctico administrado por un profesional.

En segundo lugar, Zen CP+ puede utilizarse para el tratamiento de la sensibilidad dental después del raspado y alisado radicular y para el blanqueamiento dental posterior a la atención.

## CONTRAINDICACIONES

Ninguna

## ADVERTENCIAS

- Si el dolor de los dientes sensibles empeora, deje de usar el gel y comuníquese con un profesional médico.
- Si aparecen efectos secundarios molestos, deje de usar el gel y comuníquese con un profesional médico.
- Evite tragar el gel.


- No debe ser utilizado por personas menores de 18 años o mujeres embarazadas o que estén amamantando.
- Mantenga el gel fuera y del alcance de los niños.
- Puede experimentar una ligera sensación de hormigueo en las encías después del uso.

## MODO DE USO

Para adultos de 18 años o más:

1. Desenrosque la tapa y retire el sello de aluminio antes del uso.
2. Cepíllese los dientes con una pasta de dientes estándar antes de usar Zen CP+.
3. Aplique una pequeña cantidad de Zen CP+ del tamaño de un guisante (aprox. 7 mm) en un cepillo de dientes de cerdas extra suaves o en el dedo.
4. Aplíquelo sobre el diente sensible con movimientos suaves y una ligera presión en las áreas afectadas durante aproximadamente 30 segundos.
5. Repita el proceso para cada diente sensible.
6. Escupa el exceso de gel si es necesario. Evite enjuagarse la boca con agua.
7. Evite comer y beber durante 45 minutos después de la aplicación.
8. Use Zen CP+ una vez por la mañana y una vez por la noche, durante tres semanas.

(El tamaño de un guisante, aprox. 7 mm):

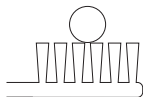

**Nota:** Se recomienda no utilizar el gel durante más de tres semanas.

## MANUEL D'UTILISATION

Gel de désensibilisation Zen CP+

## DESCRIPTION

Zen CP+ est un dentifrice en gel buccal topique exclusivement avec le phosphate de magnésium de calcium (CAPOSAL®) et le nitrate de potassium utilisé pour la protection contre la sensibilité dentaire.

Le phosphate de magnésium de calcium offre une occlusion rapide et complète des tubules de la dentine en raison d'une plus grande bioactivité à la surface de la dentine et dans les tubules des dents. Zen CP+ contient également du nitrate de potassium, qui est reconnu pour accroître la protection contre la sensibilité des dents par dépolarisation nerveuse.

## INDICATIONS RECOMMANDÉES

À utiliser pour les procédures de nettoyage et de polissage dans le cadre d'un traitement prophylactique professionnel.

En deuxième lieu, Zen CP+ peut être utilisé pour gérer la sensibilité des dents après le détartrage et le surfaçage radiculaire, et pour les soins post-blanchiment des dents.

## CONTRE-INDICATIONS

Aucune

## AVERTISSEMENTS


- Si la douleur ressentie par les dents sensibles s'aggrave, cessez d'utiliser le gel et communiquez immédiatement avec un professionnel de santé.
- Si des effets secondaires gênants surviennent, cessez d'utiliser le gel et communiquez immédiatement avec un professionnel de santé.
- Évitez d'avaler le gel.

- Non destiné aux personnes de moins de 18 ans ou aux femmes enceintes ou allaitantes.
- Gardez le gel hors de la portée des enfants.
- Une légère sensation de picotement des gencives peut être ressentie après l'utilisation.

## MODE D'EMPLOI

Pour les adultes de 18 ans et plus :

1. Dévisser le capuchon et enlever le sceau en aluminium avant l'utilisation.
2. Brossez vos dents avec du dentifrice standard avant d'utiliser Zen CP+.
3. Appliquer une petite quantité de Zen CP+ de la taille d'un pois (environ 7 mm) sur une brosse à dents à poils très doux ou un doigt.
4. Appliquer sur les dents sensibles en effectuant des mouvements délicats et en exerçant une légère pression sur les zones touchées pendant environ 30 secondes.
5. Répéter le processus pour chaque dent sensible.
6. Cracher l'excédent de gel au besoin. Éviter de rincer la bouche à l'eau.
7. Éviter de manger ou de boire pendant 45 minutes après l'application.
8. Utiliser Zen CP+ une fois chaque matin et une fois chaque soir pendant trois semaines.  
(la taille d'un pois/approx. 7 mm) :

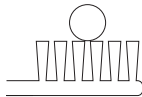

**Remarque :** il n'est pas recommandé d'utiliser ce gel pendant plus de 3 semaines.